

AGFA

Líquidos



Agfa Dentus® líquidos

Combinación de calidad - químicos para radiografías.

La combinación del revelador Agfa Dentus®D-1000 y el fijador Agfa Dentus®F-1000 están desarrollados para asegurar imágenes de la más alta calidad tanto para radiografías intraorales, como para extraorales.

Los envases de los líquidos tienen un código de color, rojo para el revelador y azul para el fijador. La codificación por colores hacen que el manejo sea sencillo.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Agfa Dentus® líquidos - Con la mejor química.

- No contienen glutaraldehído.
- Preparación de la solución sencilla.
- Presentación de 1 litro y 125 ml.
- Contenedor de polietileno completamente reciclable.


Tips para procesado

- Se recomienda utilizar el revelador y el fijador a la misma temperatura.
- Cambie la solución cada semana o después de revelar de 150 a 200 radiografías (3 x 4 cm)
- Evite el crear niebla y pre-exposición abriendo los paquetes de la radiografía extraoral y la película de la intraoral solamente en condiciones de cuarto oscuro
- Exponga las películas solamente a luz adecuada y por periodos de tiempo cortos
- Revise las condiciones del cuarto oscuro de manera regular para asegurarse de que la luz ambiental no penetra.

Temperatura en °C	16	18	20	22	24	26
Tiempo de revelado en minutos	8	6	5	4	3 1/2	3
Tiempo de fijación en minutos	2					


La temperatura de los líquidos influye en el tiempo de revelado. Le recomendamos colocar un termómetro en el área de revelado para identificar la temperatura de los líquidos y seguir la tabla de tiempos con minutos exactos para obtener resultados correctos.

La mezcla de los líquidos debe ser exacta.

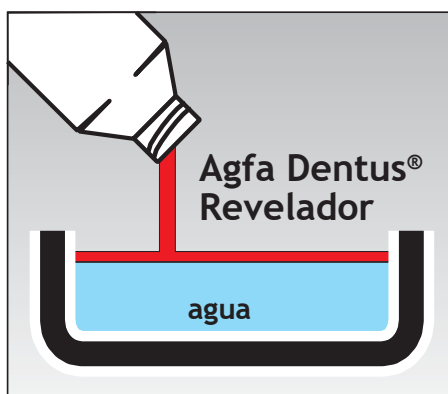


1. Revelador

1 parte de Agfa Dentus D-1000 (1 botella de 1L) y 4.5 partes de agua (4.5L) para 5.5L de solución.

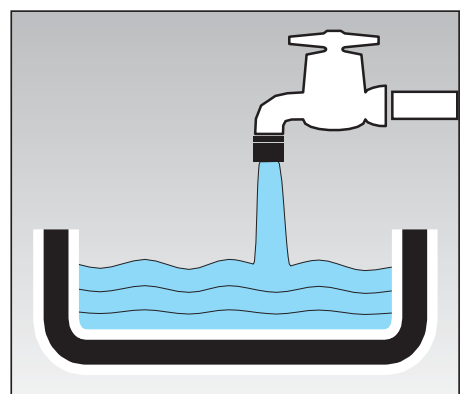


2. Enjuague intermedio

15 segundos bajo agua corriente para evitar llevar residuos de revelador al fijador.

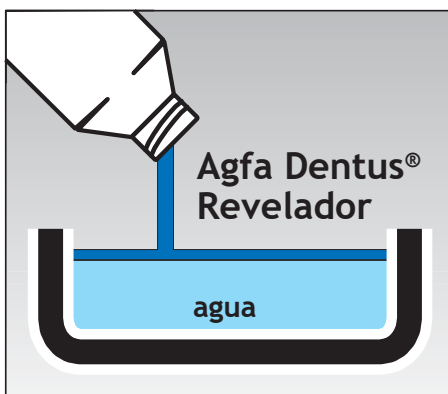

3. Fijador

1 parte de Agfa Dentus® F-1000 (1 botella de 1L) y 4.5 partes de agua (4.5L) para 5.5L de solución.

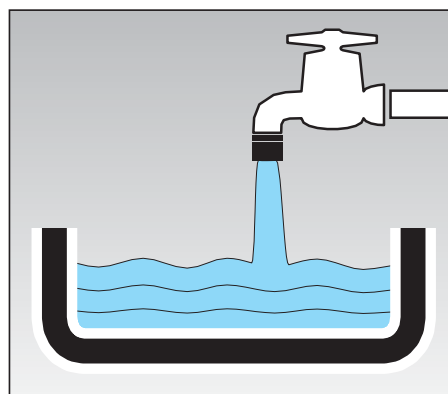

4. Enjuague final

Al menos 10 minutos bajo agua corriente para remover residuos y prevenir el cambio de color durante el almacenaje.

Código: Artículo:

Contenido:

65282194	AGFA Dentus® D-1000	1 L (Revelador)
65282259	AGFA Dentus® F-1000	1 L (Fijador)

DIDENT S.R.L.
Tel. (01) 427 - 0201
Jr. Moquegua 270 int. 129-131
Cercado de Lima, Peru.

web: dident
twitter: @didentoficial
facebook: didentoficial
youtube: Dident SRL
ventas3@dident.com.pe